



KompasTM

LETVÆGT | KOMPAKT | PRAKTISK



Invacare **Kompas** er en let, kompakt og praktisk foldbar el-kørestol. **Kompas** kombinerer friheden og overskuddet ved at have en el-kørestol med den fleksibilitet, der kendes fra en manuel kørestol.

Kompas er ideel til personer, der ønsker at opretholde en aktiv og uafhængig livsstil.

Smart og praktisk

Kompas har et smart og moderne design, der gør den let at håndtere, samt hurtig og enkel at folde ud og folde sammen med et minimum af kræfter.

Når **Kompas** er foldet sammen, fylder den ikke mere end en sammenfoldet manuel kørestol. Den kompakte størrelse er en fordel i forbindelse med opbevaring og transport.

Den kompakte størrelse gør det muligt at transportere **Kompas** i en normal personbil, når man skal på tur, på besøg, i sommerhus eller på ferie.

Kompas kan foldes sammen uden at batteri eller andre dele skal afmonteres.

Det er dog muligt, hurtigt og let, at tage batteriet af og dermed reducere den samlede vægt ifm. løft.



Overskuelig og nem at betjene

Kompas er overskuelig og nem at betjene.

Styreboksen er designet med store, tydelige og letforståelige knapper, batteriindikator og hastighedsregulator.

Ladestik er placeret, så det er let at komme til.



Sikker og komfortabel

Kompas er sikker og komfortabel og tilbyder brugeren gode køreegenskaber.

Kompas kan anvendes både inden- og udendørs samt på forskellige underlag.

Li-ion batteriet sikrer en lang levetid med god effekt og kørestrækning til at komme omkring med familie, venner eller på egen hånd.

Til opbevaring under kørsel er der bag på ryggen placeret en lomme og under sædet en aftagelig nylonkurv.



5

EGENSKABER

1

Tilpasning

- Den højdejusterbare ryg giver en god støtte og komfort, også til høje personer.
- Fodpladerne kan justeres i 3 højder og er forsynet med skridsikker overflade, der giver god understøttelse til fødderne.



2

Aftageligt Li-ion batteri

- Li-ion batteri med batteriindikator og ladestik. Batteriet er certificeret efter luftfartsselskabernes anvisninger.
- I modsætning til mange andre sammenklappelige kørestole er det ikke nødvendigt at fjerne batteripakken for at folde kørestolen sammen.



5

Kompakt og let

- Det kompakte og smarte design i kombination med en vægt på under 21 kg., gør det muligt at transportere Kompas i en almindelig personbil.



3

Et-trins foldemekanisme

- Enkel og ubesværet at folde sammen.
- Kompakte dimensioner på 590 x 370 x 810 mm i sammenklappet tilstand.



4

Anti-tipper

- Giver ekstra sikkerhed under kørsel, samt stabilitet ifm. transport og opbevaring i foldet og stående position.

Yderligere egenskaber

► Styresystem

- Let forståeligt styresystem med store tydelige knapper, batteriindikator og hastighedsregulator.
- Ladestik er placeret, så det er let at komme til.

► Intelligent bremsesystem

- Bremses automatisk, når joystick ikke er aktiveret og forhindrer utilsigtet kørsel.

► Luftfyldte drivhjul

- Luftfyldte drivhjul giver affjedring og sikrer en komfortabel og behagelig kørsel.

► Opbevaring

- Til opbevaring under kørsel er der bag på ryggen placeret en lomme og under sædet en aftagelig nylonkurv.

► Frikobling

- Let at betjene og gør det muligt at frikoble motorer og skubbe el-kørestolen manuelt.

► Større batterikapacitet

- Det er muligt at tilkøbe større batterier, der giver en ekstra kørestrækning på op til 18 km på en opladning.

Tekniske data ▼


For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Sædebredder	Sædedybde ▼	Sædehøjde fra gulv ▼	Sammenfoldet ▼	Chassisbredder	Totallængde inkl. benstøtte ▼	Totalhøjde ▼
Kompas	460 mm	420 mm	520 mm	590 x 370 x 810 mm	590 mm	970 mm	950-1000 mm

	Vægt ▼	Max. brugervægt ▼	Batteri-kapacitet ▼	Batterivægt ▼	Motoreffekt ▼	Vende-diameter ▼	Frihøjde ▼
Kompas	20,9 kg u/batteri	115 kg	24 volt / 11,4 ah li-ion batteri	2,1 kg	70 Watt	825 mm	30 mm

	Max. hældning ▼	Kørestrækning ▼	Hastighed ▼	Drivhjul ▼	Svinghjul ▼
Kompas	6°	11 km	6,4 km/t	8" luftfyldt	7" massiv

Farve på chassis ▼

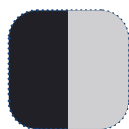

Sort og grå

Farve på polstring ▼



Sort

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark



© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information is at the time of printing correct.

Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel. Kompas - DK - 05/2021