



rea

Confidence in posture solutions

rea

Azalea[®] / Azalea[®] Assist

En let komfortkørestol med
fantastisk siddekomfort

Trusted Solutions,
Passionate People



Yes, you can.[®]

Rea **Azalea** er det naturlige valg til både den lidt aktive bruger og den mere passive bruger. Det komfortable sædesystem giver brugeren mulighed for at ændre siddestillingen, og giver således mest mulig komfort. Dette kombineret med gode køreegenskaber gør **Azalea** til det perfekte valg. **Azalea** fås også med 16" drivhjul og kaldes Rea **Azalea Assist**.

Rygsystemet, kaldet **Flex 3**, er multijusterbart i højde, bredde og form - og kan opfylde alle former for positioneringsbehov. **Azalea** leveres i en smart chassisfarve og kan vælges i tre forskellige betræk designs.

Sædekip og rygtilt gør livet komfortabelt

Azalea og **Azalea Assist** har henholdsvis 21° og 25° sædekip og 30° rygtilt. Begge dele er let at indstille for både bruger og hjælper, hvad enten det er manuelt eller elektrisk betjent. Med det forbedrede sædekip på **Azalea Assist** er det muligt at opnå endnu bedre positionering og trykaflastning og således optimal komfort og hvile. Ryggen er monteret med biomekanisk ryghængsel, der ved indstilling følger brugerens naturlige bevægelsesmønstre. Med 3 forskellige chassisstørrelser er det muligt at opnå sædebredder fra 390 - 590 mm. Kørestolens sædebredde kan indstilles individuelt ved armlæn og benstøtteophæng.

Egenskaber og muligheder



Flex 3, fast rygplade

Rygpladen er både justerbar i bredde og højde.



Flex 3, justerbar ryg med velcro

Multijusterbar velc Roryg med mulighed for justering i højde, bredde og vinkel - kan formes til mange forskellige kropsformer.



Mange valgmuligheder

Individuel justering af armlæn og benstøtter samt en mængde tilbehør gør stolen fleksibel og depotøkonomisk.

Tekniske data

For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacare website: <http://www.invacare.dk>

	Sædebredde	Sædedybde	Sædehøjde	Ryghøjde	Armlænshøjde	Benstøtte-længde	Sædevinkel	Rygvinkel
22"/24" drivhjul	390-450/440-500/ 490-550 mm	430 - 500 mm	360 1/400/ 450 mm	540-790 mm (uden sædepude)	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1°-23° Option (1°-24°)	0°-30°
16" drivhjul	(390-490/440-540/ 490-590 mm)	430 - 500 mm	400/450 mm	540-790 mm (uden sædepude)	240 - 360 mm	330 - 500 mm	-1°-23° Option (1°-24°)	0°-30°
	Totalbredde	Totalhøjde	Totallængde inkl. benstøtter	Total vægt	Max brugervægt	Transportvægt	Crashtestet	Maximum vejrhældning ved håndbremse
22"/24" drivhjul	SB + 220 mm	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg (SB 440 mm)	Max 135 kg	16,5 kg	ISO 7176-19	7°
16" drivhjul	SB + 230 mm	900-1250 mm	950-1020 mm	34 kg (SB 440 mm)	Max 135 kg	16,5 kg	ISO 7176-19	7°

Stelfarve

Antracitblå



Betræk


Sort Aero
(Standard)



Sort plys



Sort dartex

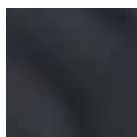

- Som specialprodukt, mod merpris, kan Rea **Azalea** bestilles i sædehøjde 360 mm



Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®