

Platinum[®] Mobile



Bærbar iltforsyning



Platinum Mobile fordele

Invacare **Platinum Mobile** er en elegant, innovativ og brugervenlig løsning.

Platinum Mobile er den seneste bærbare iltkoncentrator fra Invacare. Med **Platinum Mobile**

tilbyder vi den sidste nye pulseflow teknologi med op til 5 forskellige indstillinger. **Platinum Mobile** har et flot design og en intuitiv brugerflade, som forener enkelhed og innovation i en let og robust pakke.

Patienternes behov har været vores vigtigste fokus i alle faser af tilblivelsen af **Platinum Mobile**, hvilket har resulteret i:

- ▶ **Holdbarhed**, selv ved intensiv brug
- ▶ **Klinisk effektivitet** med Sensi-Pulse-teknikken
- ▶ **Simpel og intuitiv** betjening
- ▶ Mindre vedligehold



Nyhed



Tilslut din smartphone

- ▶ Få mulighed for at forbinde din **Platinum Mobile** iltkoncentrator med din smartphone*
- ▶ Du får mulighed for at ændre dine indstillinger og se batteristatus på din smartphone

*Bluetooth dongle skal tilkøbes som tilbehør.

FLERE FORDELE



Testet til danske vejrforhold

Platinum Mobile er testet mod vandindtrængen iht. EC 60601-1, så du ikke bliver påvirket af omskifteligt vejr, når du er ude.



Luftfugtighedstest

Færre slanger og forbindelser i konstruktionen betyder, at der er mindre risiko for lækager. Batterier og kontakter er desuden forsynet med særlig beskyttelse.



Stødsikker

Platinum Mobile er forsynet med specielt designede støddæmpere og skumpolstring, der gør den ekstra holdbar.



Let vedligehold

Platinum Mobile er designet, så den kræver et minimum af vedligehold for brugeren.



Let at anvende

Platinum Mobile har en enkel og nem brugerflade, for at skabe større tryghed for patienten. Klinisk dokumentation har vist, at stress og angst har indvirkning på helbredet hos KOL-patienter, så for at undgå påvirkninger heraf, har vi gjort **Platinum Mobile** særlig enkel at anvende.

Unikt batteridesign

- ▶ Let udskiftning af batteri
- ▶ 2 batteri-rum
- ▶ Integreret batteriindikator

3-i-1 taske

- ▶ Kan anvendes som rygsæk, skuldertaske eller håndtaske
- ▶ Gummibeskyttet for støddæmpning
- ▶ Tydelige visuelle symboler
- ▶ Indbyggede luftindtag



Klinisk effektivitet




◀ Klinisk effektiv

Platinum Mobile er Invacare's mest klinisk effektive bærbare iltkoncentrator. Sensi-Pulse teknologien sikrer, at ilttilførslen kommer præcis, når du har brug for det i begyndelsen af åndedrættet. Hvis iltniveauet er under 87% aktiveres både et synligt samt et hørbart alarmsignal.

Indstilling	P1	P2	P3	P4	P5
Volume ved 20 BPM	11 ml	22 ml	33 ml	44 ml	50 ml
Volume ved 30 BPM	7.3 ml	14.7 ml	22 ml	29.3 ml	33.3 ml
Volume pr. minut (ml)	220	440	660	880	1000
Batteritid (timer)	5t05min	3t30min	2t20min	1t45min	1t45min
Batteritid - 2 batterier (timer)	10t10min	7t	4t40min	3t30min	3t30min

Tidsangivelserne er vejledende

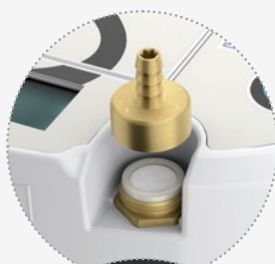

◀ Let vedligehold

Let adgang til filtre

- ▶ Integreret og let tilgang til udgangs- og partikelfilter



Let at rengøre

- ▶ Integreret filter, der er en del af tasken
- ▶ Tasken kan rengøres med en mild sæbeopløsning

Egenskaber ▾



▲ Lydniveau

Lydniveauet er under 40 dB (indst. P2), hvilket gør at patienterne ikke behøver at tænke på, om de kan komme på stille steder, som fx på biblioteket eller i biografen



▲ Let mobilitet

Med sine kun 2,2 kg er **Platinum Mobile** let at tage med og understøtter patientens frihed til et aktivt liv.



▲ Let at have med

Den unikke bæretaske kan meget nemt ændres til en praktisk rygsæk, der giver helt frie hænder under brug.



▲ Lang batteritid

Platinum Mobile kan anvendes i op til 5 timer med et enkelt batteri og i op til 10 timer med 2 batterier (indst. 1).



▲ Letforståeligt display

Et tydeligt display giver oplysninger om batteritilstand, så du ved, hvornår du skal oplade eller skifte batteri.



▲ FAA Godkendt

Platinum Mobile er godkendt til transport i fly af FAA.

Platinum Mobile leveres med:

▶ 3-i-1 taske

Kan anvendes som rygsæk, skuldertaske eller håndtaske.

▶ Batteri

1 stk. Lithium batteri

▶ Oplader til lysnet

Lader batterier ved hjælp af 220V.

▶ 12V billader

Oplader batteriet i bilen (kontroller om din bils 12V-stik kan anvendes til dette).



Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger se venligst brugermanual på www.invacare.dk

Højde ▼	Bredde ▼	Dybde ▼	Vægt ▼	220V oplader ▼
				
Platinum Mobile	239 mm	188 mm	2.22 kg Koncentrator 0.45 kg Batteri 0.34 kg Taske	110-240 VAC 50-60 Hz
12V Billader ▼	FAA ▼	Pulse Flow ▼	Ilt renhed ▼	IP-Klassificering ▼
				
Platinum Mobile	11-16 VDC	FAA Godkendt	Indstilling 1-5 Op til 1000 ml/ minut	87% - 95.6% Koncentrator IP22
Strømforgbrug ▼	Støjniveau ▼	Opladningstid ▼	Følsomhed iltudløser ▼	Næsekateter længde ▼
				
Platinum Mobile	24W Indstilling 2	< 40 db(A) Indstilling 2	2t 20 min. (1 batteri) 4t 40 min. (2 batterier)	0,18 cm H2O ved indstilling 2 og 20 bpm 1200 mm - 2100 mm

Standardpakken inkluderer: ▼

- **Platinum Mobile** bærbar koncentrator
- Transporttaske
- Skulderstrop
- Rygsækstrop
- Lithium Ion batteripakke
- AC 110-240V oplader
- DC 12V billader
- 1200 mm næsekateter
- Brugermanual



Klinisk evidens ▼

- Cuvelier A, MUIR J-F, CHAKROUN N, ET AL. Refillable oxygen cylinders may be an alternative for ambulatory oxygen therapy in COPD Chest 2002 vol 122(2): 451-456 LEWARSKI J, MIKUS G, ANDREWS G, CHATBURN R.
- A clinical comparison of portable oxygen system: continuous flow compressed gas vs. oxygen concentrator gas delivered with an oxygen conserving device; Respir care 2003 vol. 48(11); 111 TURNBULL J, MCDONNELL L, AC DAVIDSON AC.
- Patient activity levels and oxygen device preference: a randomised-controlled trial comparing Homefill® refillable cylinders with usual ambulatory device Thorax 2012; 67 (suppl 2): A 83 **Clinical evidence on portable oxygen concentrator** COUILLARD A, FORET D, BAREL P, BAJON D. Oxygen therapy by a portable concentrator with a demand valve: a randomised controlled study of its effectiveness in patients with COPD; Rev mal respir. 2010 NOV; 27(9): 1030-8.
- **Clinical evidence on transportable oxygen concentrator** MELLONI B, SAUDER P, FORET D, COUILLARD A, VEALE D. Clinical Effectiveness of SOLO2 Antadir Federation, October 2011.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605
Brøndby
Denmark



QR-Kode
oxygen-therapy.net

