



Invacare®


# **Propad Premier**

Profilert pude designet til at give trykaflastning, komfort og støtte

Trusted Solutions,  
Passionate People



Invacare **Propad Premier** er designet til at give god trykaflastning, hvad enten puden benyttes i kørestol eller almindelig stol. **Propad Premier** består af to lag skum, hvor det øverste er skåret i profiler og minimerer shear og friktion.

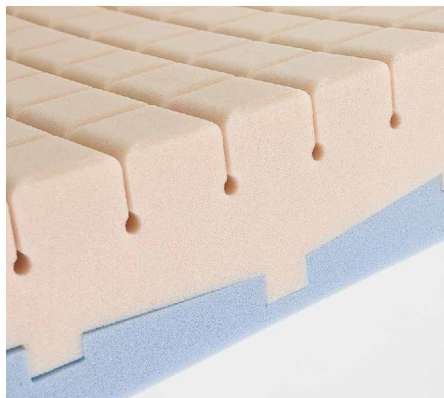

## Egenskaber og tilbehør



### Betrækket hjælper til fore-byggelse af shear og friktion

Betrækket er strækbart i alle retninger, vandafvisende og ånd-bart. Betrækket har skridsikker bund.



### Fås i forskellige størrelser

**Propad Premier** kan leveres i 9 forskellige størrelser fra 400 x 400 mm til 500 x 500 mm.



### Lynlås med overfald

Lynlås på 3 sider med stort overfald hindrer væske i at trænge ind i puden og beskytter skumkernen. Betrækket fås som inkontinensbetræk og kan let afmonteres og vaskes.

## Komfort og tryksårsforebyggende






Invacare **Propad Premier** består af to lag skum. Det nederste blå lag er fremstillet af fast formet skum, således at det giver god stabilitet og støtte. Det øverste lag skum er opskåret i tern og tillader brugeren at synke ned i materialet og dermed fordele trykket over en større overflade. Den profilerede overflade minimerer tillige shear og friktion og tillader god cirkulation af luften.

## Profileret overflade

**Propad Premier** er opskåret i tern, hvilket reducerer shear og friktion samtidig med, at trykaflastning opnås.

## Tekniske data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

Antal størrelser:	Højde	Vægt	Max brugervægt	Rengøring
				
9	100 mm	1 kg	110 kg	80°

Fremstillet i henhold til følgende Europæiske standarder: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, og BS 7175 (Crib 5)

## Farve

Sort



Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark



Yes, you can.®